

Méthodes de nettoyage

- 1 -Trempez environ 5 à 8 minutes dans de l'alcool 70%
 - 2 -Utilisez des ultraviolets pour désinfecter pendant environ 45 minutes
 - 3 -Rincez sous l'eau avant et après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser d'autoclave, de vapeur ou n'importe quelle autre méthode à haute température pour désinfecter le dermaroller.

Attention

Ne pas utiliser le dermaroller sur une peau irritée, infectée, sur des infections cutanées, la rosacée, etc...

Si vous n'êtes pas sûr de l'état de votre peau, consulter un dermatologue avant de l'utiliser. S'il y a une sensibilité cutanée, arrêtez d'utiliser immédiatement ce produit et consultez un médecin ou un dermatologue.

Rangez le rouleau soigneusement et gardez-le hors de portée des enfants. Ne partagez pas le dermaroller, il doit être **utilisé exclusivement par la même personne.**

DERMAROLLER

Instructions avant utilisation

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions suivantes. Elles contiennent des informations importantes sur le système de micro-aiguille (MNS). Nos micro-aiguilles sont en titane.

Utilisation

Assurez vous que votre visage est parfaitement propre
Ne jamais appliquer de force lorsque vous roulez sur votre visage
Utilisez pendant 10 à 15 minutes.
Commencer par 1 à 2 fois par semaine pendant un mois, puis 3 à 4 fois par semaine.
Ne jamais utiliser sur les pores ouverts.

Attention

Ne pas utiliser le dermaroller sur une peau irritée, infectée, sur des infections cutanées, la rosacée, etc...

Si vous n'êtes pas sûr de l'état de votre peau, consulter un dermatologue avant de l'utiliser. S'il y a une sensibilité cutanée, arrêtez d'utiliser immédiatement ce produit et consultez un médecin ou un dermatologue.

Rangez le rouleau soigneusement et gardez-le hors de portée des enfants. Ne partagez pas le dermaroller, il doit être **utilisé exclusivement par la même personne.**


Mode d'emploi DERMAROLLER

Micro-aiguilles Titane

Méthodes de nettoyage

- 1-Trempez environ 5 à 8 minutes dans de l'alcool 70%
 - 2-Utilisez des ultraviolets pour désinfecter pendant environ 45 minutes
 - 3-Rincez sous l'eau avant et après chaque utilisation
- Ne pas utiliser d'autoclave, de vapeur ou n'importe quelle autre méthode à haute température pour désinfecter le dermaroller.

Figure de déplacement des micro-aiguilles

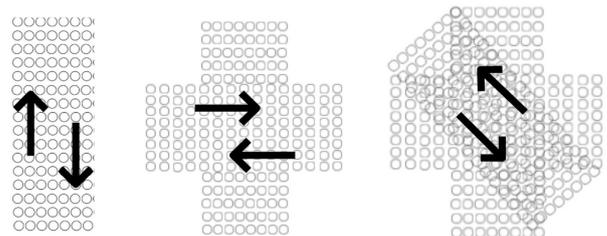

Verticalement

Horizontalement

En diagonal